

Sicherheitschränke für entzündbare Stoffe



Die Beschreibung bezieht sich auf das Modell
AC 1200 GS


→ ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Sicherheitschränke zur Aufbewahrung von 160 Liter flüssigen und festen entzündbaren Stoffen übereinstimmend mit der DIN EN 14470-1 Norm.

→ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Thermische Vorrichtung, die automatisch die Tür schließt, wenn die Raumtemperatur über 50°C ist. Nicht elektrisch
- Das Belüftungssystem ist mit zwei feuerfesten Ventilen zur Luftdurchströmung ausgestattet, das sich automatisch schließt bei 70+/- 10°C nach Norm.
- Drei Regale aus AISI 304 Inox Blech (Edelstahl) mit Auszugshaken, für ein leichteres Handhaben mit entzündbaren Stoffen. Die Regale sind wie kleine Wannen geformt, um eventuelle ausgelaufene Stoffe zu sammeln. Jedes Regal hat eine Kapazität von 14 Liter und 100 Kg.

- Die unterste Wanne ist aus AISI 304 Inox Blech (Edelstahl), Kapazität 45 Liter.
- Sicheres Schließen durch das neue Drei-Punkte-Schloss nach der EC Norm.
- System für ein unerlässliches Erden des Gehäuses
- Kontrolle auf der 1:1 Skala für die Dicke des Plastifikats, geprüft nach der ISO Norm
- Warnungsaufkleber "No smoking" und "fire" (Rauchen verboten, Feuergefahr) nach den Anforderungen der "European Community Norms" (DIN 4844 und ISO 3864)
- Ausgestattet mit 4 verstellbaren Beinen.

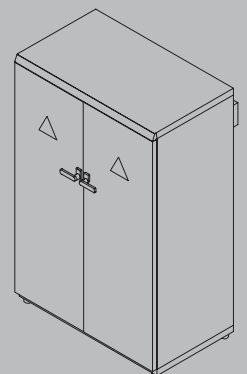

Sicherheitsschränke für entzündbare Stoffe

Die Beschreibung bezieht sich auf das Modell AC 1200 GS

→ BESCHREIBUNG

- Hergestellt nach der Technik Entfettung und Elektrogalvanisation, dann mit säurefestem Epoxid Pulver plastifiziert und im thermischen Tunnel bei 200°C gebrannt.
- Neue Konstruktion mit doppeltem Gehäuse ganz isoliert mit einem feuerbeständigem Material.
- Neue Konstruktion des Gestells für einen leichteren Transport.

→ ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

- Vorbereitung für Filterung und/oder Belüftung

→ MAßE

Aussenmaße	mm. 1190x650x2000 h
Innenmaße	mm. 530x450x1500 h
Insgesamte Tiefe	mm. 1005x460x1715 h
Gewicht	kg. 460
Innenvolumen	cca 855 l

Grga & Melita

Kroatien, 10 000 Zagreb, Sveti Duh 62
telefon: +385 (1) 3745 510, 3906 616
handy: +385 (98) 355 274, 492 717
telefax: +385 (1) 3906 615
e-mail: grga-melita@zg.t-com.hr
web: www.grga-melita.hr