

Sigurnosni ormari za zapaljive tvari



simbolična slika


Opis se odnosi na model AC 1200 CM

→ OPĆE KARAKTERISTIKE

- sigurnosni ormar za skladištenje 160 litara tekućih i krutih zapaljivih tvari u skladu sa EN 14470-1 Normom.

→ TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Termički uređaj koji automatski zatvara vrata iznad sobne temperature preko 50°C. Nije električan
- Sistem ventilacije opremljen sa dva protupožarna ventila za recirkulaciju zraka koji se automatski zatvaraju na 70+/-10°C u skladu sa normom.
- Tri police izrađene od AISI 304 inox lima sa izvlačnim kukama radi lakšeg rukovanja sa zapaljivim tvarima. Police su oblikovane poput kadice da sakupljaju eventualno prolivene tvari. Svaka polica ima kapacitet od 14 litara i 100 kg.
- Najdoljnja kadica napravljena od ANSI 304 inox lima, kapaciteta 45 litara.
- Sigurnosno zatvaranje na tri točke sa novom bravom u skladu sa EC Normama
- Sistem za obavezno uzemljenje kućišta
- Test na 1:1 skali za provjeru debljine plastifikata u skladu sa ISO Normom
- Naljepnice No smoking i fire opasnosti prema zahtjevima "European Community Norms" (DIN 4844 and ISO 3864).
- Opremljen sa 4 podesive nogice.

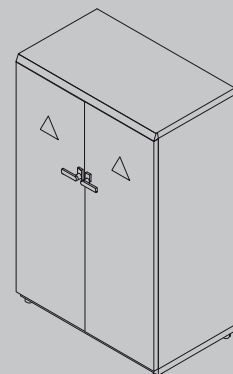

Sigurnosni ormari za zapaljive tvari

Opis se odnosi na model AC 1200 CM

→ OPIS

- Proizveden tehnikom odmašćivanja i elektrolgalvanizacije zatim plastificiran epoksidnim kiseloootpornim prahom i zapečen u termičkom tunelu na 200°C.
- Nova konstrukcija sa dvostrukim kucištem potpuno izoliran specijalnim nezapaljivim materijalom.
- Nova konstrukcija postolja za lakši transport .

→ DIMENZIJE

vanjske dimenzije	mm. 1180x650x1985 h
težina	kg. 490
unutarnji volumen	cca 855 l

→ DODATNA OPREMA

- Pripremljen za filtraciju i/ili ventilaciju
- ventilatori
- ventilatori u Ex izvedbi,
- filteri
- ventilatori sa filterom
- police
- termički sustav za automatsko zatvaranje vrata
- CUNTATOR (automatska dojava za zamjenu filtera)

→ JOŠ U PONUDI

	DIMENZIJE	TEŽINA	KAPACITET	TIP OTPORNOSTI	IZVEDBA
AC 120 CM	1180x650x1985	490 kg	160 l	90 min i 30 min	VRATA
AC 600 CM	680x650x1985	350 kg	80 l	90 min	VRATA
AC 1200/50 CM	1180x720x730	240 kg	85 l	90 min	VRATA
AC 1200/50 CMD	1180x510x600	220 kg	80 l	90 min	LADICA
AC 1200/50 CMDD	1180x510x600	220 kg	80 l	90 min	2xLADICA
AC 600/50 CM	600x500x600	140 kg	30 l	90 min	VRATA
AC 600/50 CMD	600x500x600	140 kg	80 l	90 min	LADICA

Grga & Melita

Croatia, 10 450 Gornja Zdenčina,

Trg Ante Starčevića 1

tel: +385 (1) 3745 510, 3906 616

fax: +385 (1) 3906 615

e-mail: info@grga-melita.hr

web: www.grga-melita.hr