






## Laboratorijski sudoperi



simbolična slika

### → OPĆE KARAKTERISTIKE

- Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047
- Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom
- Vrata od vlagootpornog iverala
- Noge od PP-a RAL 7047 visine 150 sa nivelacijskom stopicom
- Ručkice ergonomске izrađene od ABS-a
- Velika nosivost i stabilnost
- Sukladno HRN D.E2.104. HRN D.E2.105.
- Radne površine mogu biti: polypropylene, keramika, inox ili epoxy ovisno o namjeni laboratorija

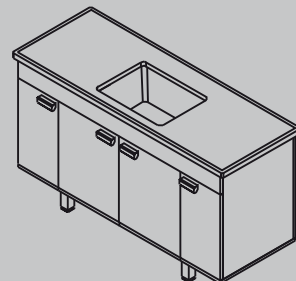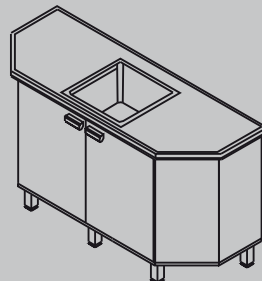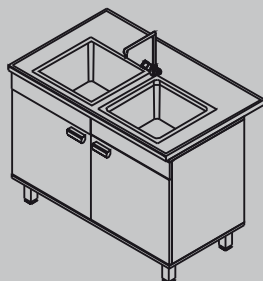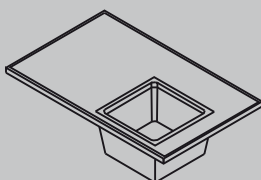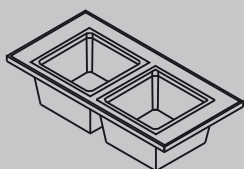

## Laboratorijski sudoperi

### → DIMENZIJE LAB. SUDOPERA OD POLIPROPILENA

	ŠIRINA	DUBINA	VISINA	BR. KORITA	OZN. KORITA
<b>standardne mjere</b>	600	750	900	1	E
	1200	750	900	1,2	A,B,C,D,E
	1500	600	900	1	E
	600	600	900	1	D
	750	600	900	1	E
	1800	750	900	1,2,3	A,B,C,D,E

### → DIMENZIJE KORITA OD POLIPROPILENA

	ŠIRINA x DUBINA x VISINA	OZNAKA KORITA
<b>standard</b>	100 x 100 x 100	A
	100 x 250 x 150	B
	300 x 300 x 200	C
	400 x 400 x 300	D
	500 x 400 x 300	E



### → DODATNA OPREMA

- Laboratorijske armature raznih izvedbi i namjena
- Ventili i nosnice
- Ispiralice za oči
- Zidno cjedilo za posuđe (jez sa 72 bodlje)
- Vakuum sisaljke

### → STANDARDNE RADNE PLOČE



#### TEHNIČKA LJEVANA KERAMIKA

Izuzetna mehanička i kemijska otpornost, negoriva.




#### POLIPROPILEN

Izuzetna kemijska otpornost.



#### EPOKSI

Izuzetna kemijska otpornost. Mogućnost izvedbe spojeva bez prijelaza (za mikrobiologiju).

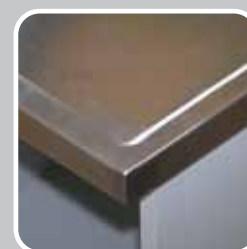

#### INOX

Radne površine za zahtjevne mehaničke i vlažne uvjete (praonice).

Grga & Melita

Croatia, 10 450 Gornja Zdenčina,

Trg Ante Starčevića 1

tel: +385 (1) 3745 510, 3906 616

fax: +385 (1) 3906 615

e-mail: info@grga-melita.hr

web: www.grga-melita.hr