

Sigurnosni ormari za kiseline i lužine



simbolična slika

Opis se odnosi na model AA 600


→ OPĆE KARAKTERISTIKE

- Ventilirani i filtrirani sigurnosni ormar za skladištenje 90 litara kemikalija, kiselina i lužina u skladu sa TUV PP 51021:1996, DIN 31 001-1/DIN 4554/ZH 1/428 Normama.

→ TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Tri police izrađene od plastificiranog 10/10 mm debelog čelika. Police su oblikovane poput kadice da sakupljaju eventualno prolivene kiseline ili lužine. Svaka polica ima kapacitet od 11 litara i 100 kg.
- Najdoljnja kadica napravljena od kiselootporno plastificiranog inox lima, kapaciteta 35 litara.
- Termički zaštićen aspirator IMQ IPX4 CE.
- ON/OFF lampica.
- Karbonski filter
- Napajanje: 220/230 V

- Električna potrošnja: 65 Watt.
- Test na 1:1 skali za provjeru debljine plastifikata u skladu sa ISO Normom
- Naljepnice opasnosti prema zahtjevima "European Community Norms" za nagrizajuće, otrovne i štetne po zdravlje proizvode
- Opremljen sa 4 podesive nogice.

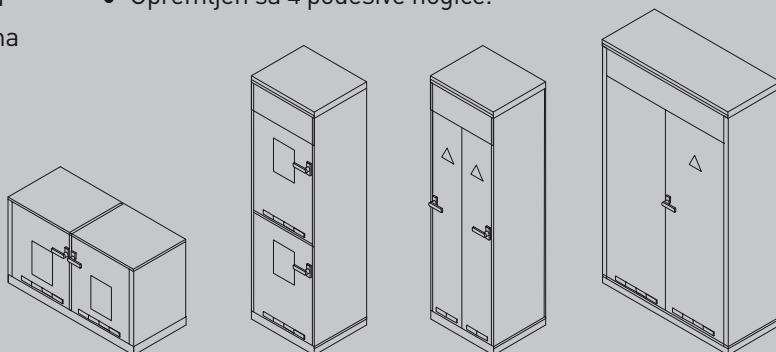

Sigurnosni ormari za kiseline i lužine

Opis se odnosi na model AA 600

→ OPIS

- Proizveden tehnikom odmaščivanja i elektrogalvanizacije zatim plastificiran epoxidnim kiselo otpornim prahom i zapečen u termičkom tunelu na 200°C.
- Sigurnosno zatvaranje na tri točke sa novom bravom u skladu sa EC Normama
- Nova konstrukcija postolja za lakši transport .

→ DIMENZIJE

vanjske dimenzije	mm. 600x500x2010 h
unutarnje dimenzije	mm. 530x450x1500 h
težina	kg. 100
unutarnji volumen	cca 378 l

→ DODATNA OPREMA

- Rezervni filter F007.
- Filter za formaldehide F007F.
- filteri, police, CUNTATOR
(automatska dojava za zamjenu filtera)

→ JOŠ U PONUDI

	DIMENZIJE	TEŽINA	KAPACITET	VENTILATOR	FILTER
AA 1200	1200x500x2010	150 kg	160 l	DA	DA
AA 600	600x500x2010	100 kg	90 l	DA	DA
AB 30/30 EST	600x500x2010	140 kg	40+40 l	DA	DA
AB 600	600x500x2010	105 kg	45+45 l	DA	DA
A 600/50	600x500x720	45 kg	50 l	DA	OPCIJA
AB 900/50	900x500x720	70 kg	35+35 l	DA	OPCIJA
AB 1200/50	1200x500x720	80 kg	45+45 l	DA	OPCIJA
A 120	1200x500x1690	130 kg	160 l	NE	NE
A 600	600x500x1690	90 kg	90 l	NE	NE

Grga & Melita

Croatia, 10 450 Gornja Zdenčina,

Trg Ante Starčevića 1

tel: +385 (1) 3745 510, 3906 616

fax: +385 (1) 3906 615

e-mail: info@grga-melita.hr

web: www.grga-melita.hr